



● Une approche visionnaire  
en cabinet de consultation

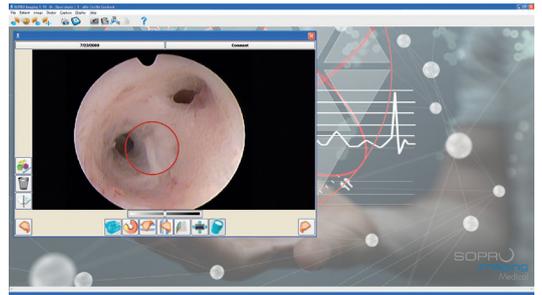

INTUITIVE  
CONNECTION

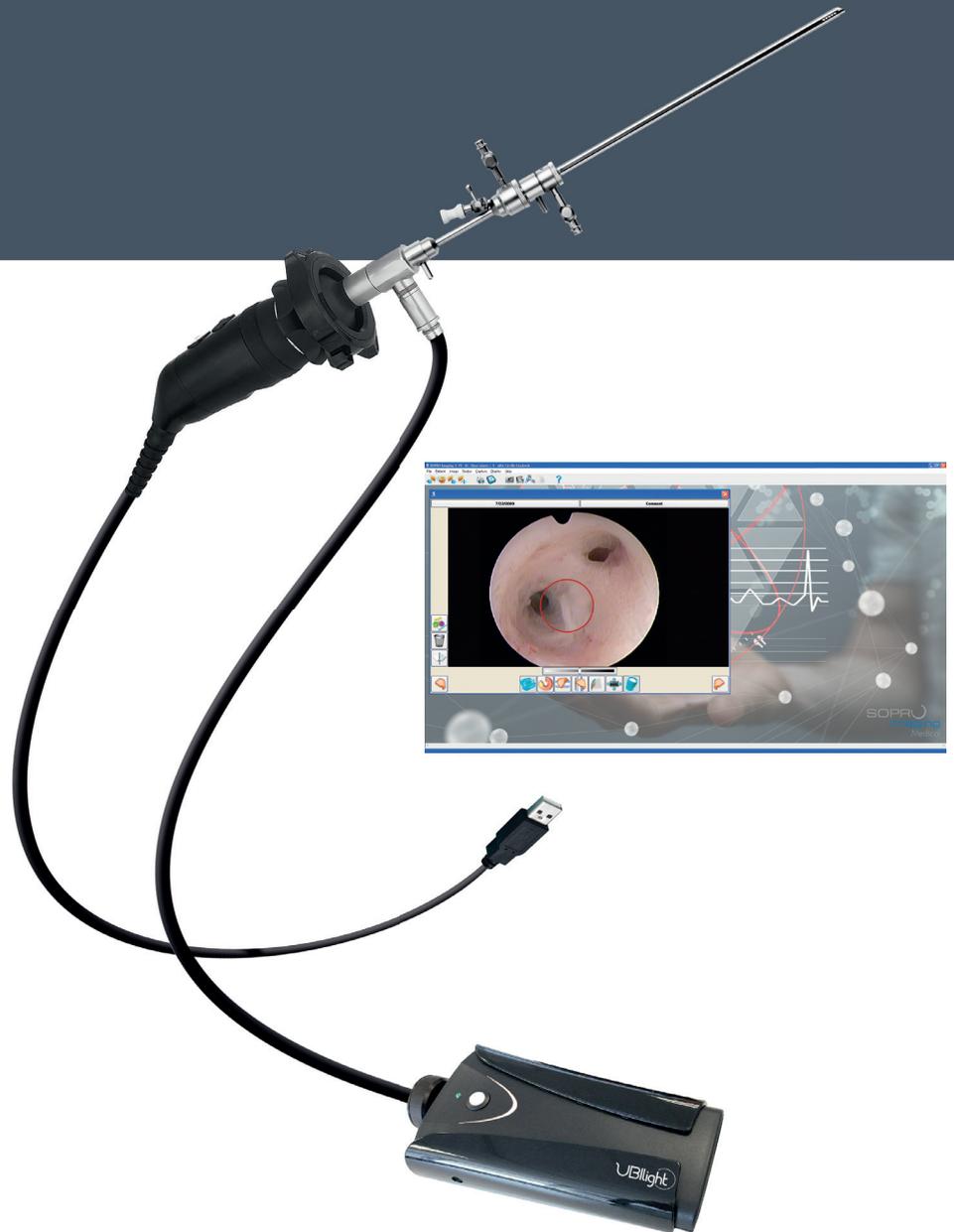

# UBIPACK

**COMEG**  
medical technologies

# UN SYSTÈME CLÉ EN MAIN

## Encore plus de rentabilité

Ubipack est un système complet, léger et pratique qui peut s'utiliser facilement en cabinet de consultation.

Grâce à sa sortie USB 2.0, branchez directement la caméra sur votre ordinateur et optimisez ainsi l'espace dans votre cabinet.

Plug & Play, Ubipack GYN est donc une solution unique, qui vous fera gagner sur tous les plans.

Soyez indépendant dans la réalisation de vos actes en cabinet de consultation et faites ainsi des économies en libérant le bloc opératoire.



« Le nouveau système numérique et compact Ubipack développé par COMEG représente un véritable cadeau technologique puisqu'il rassemble en un seul dispositif un poste de travail à la fois polyvalent et économique de vidéo-endoscopie de haute qualité. »

Pr S. HAIMOVICH  
Hospital Del Mar,  
Barcelone, Espagne

# UBIPACK

# UN SYSTÈME PERFORMANT ET INTUITIF POUR UN DIAGNOSTIC DE QUALITÉ

## Encore plus de facilité et de visibilité

### UBICAM

Ubicam est une caméra vidéo intelligente et ergonomique, spécialement développée pour les applications diagnostiques :

- Sortie numérique USB2.0,
- Objectif pour le diagnostic,
- 2 boutons pour piloter la balance des blancs et le mode «anti-moiré» pour les fibroscopes.

Le dispositif **ICE** (Intelligent Control Endoscope) inclus dans Ubicam optimise l'ensemble des réglages de celle-ci. Quels que soient l'environnement et l'endoscope utilisé, l'objectif est de vous procurer la meilleure qualité d'image possible, sans que vous n'ayez jamais besoin d'intervenir.

Ce procédé exclusif analyse en temps réel :

- Le diamètre de l'endoscope,
- La température de couleur,
- La puissance lumineuse.

### SOPRO Imaging

Le logiciel Sopro Imaging Medical constitue une base de données complète de l'ensemble de vos patients. Une multitude d'outils ergonomiques et performants vous permettront par exemple :

- La capture d'images et de vidéos,
- L'annotation de photos/vidéos,
- L'édition et la personnalisation de rapports médicaux,
- Le montage vidéo simple et intuitif,
- L'enregistrement sonore,
- La sécurisation des données.




### UBlight

Ublight est un concentré de performances dans un design séduisant et compact.

- Puissance équivalente à une lampe 100 watts xénon,
- Durée de vie de la LED de 50 000 heures,
- Chaleur émise réduite,
- Image lumineuse en toutes circonstances,



- Température de couleur qui optimise les contrastes couleurs,
- Convivialité et simplicité d'utilisation,
- Meilleur ratio taille produit vs. intensité lumineuse du marché.

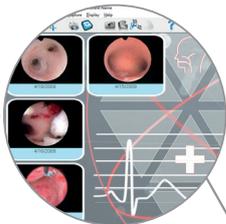

**Ubipack**  
vous permet d'obtenir  
des résultats fiables et de  
proposer un suivi optimal et  
une meilleure communication  
avec vos patients, grâce  
à la création de rapports  
personnalisés et au partage  
des données.



# LE KIT STANDARD UBIPACK GYN COMPREND : Réf. S\_K10\_1015

Caméra Ubicam + source de lumière Ubilight + 1 licence du logiciel Sopru Imaging Médical  
+ objectif 18,5 mm + câble de lumière + 2 adaptateurs



	CAMERA Ubicam	1 CCD CAMERA
POWER CONSUMPTION	2,5VA	25VA

## UBICAM

Caméra CCD 1/4", **USB** pour l'aide au diagnostic  
Réf. S\_181\_0011

Compatibilité

Ubicam est compatible avec tous les :  
• Endoscopes rigides  
• Endoscopes souples  
• Colposcopes\*



\* Equipés d'un séparateur optique


## UBIlight

Source de lumière à **LED** pour la consultation  
Réf. S\_281\_0002

Source de lumière à LED Ubilight (Intensité équivalente à 100W).  
Avec transformateur externe, Adaptateur Storz



	Ubilight LIGHT SOURCE	XENON LIGHT SOURCE
POWER CONSUMPTION	30VA	350VA

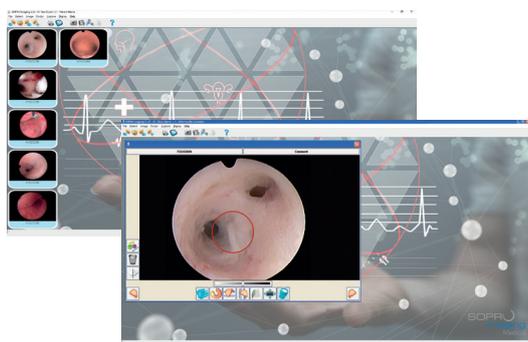

## SOPRU imaging

Le logiciel d'imagerie complet développé  
par des médecins pour les patients  
Réf. 505026\*

\* Nous contacter pour une version compatible MAC.

# UBIPACK

# ● COMEG, VOTRE PARTENAIRE POUR L'ENDOSCOPIE

En combinaison avec Ubipack :

Le chariot de consultation mobile, ainsi que son ordinateur tactile intégré, répondront parfaitement à vos besoins pour les hystérosopies diagnostiques en cabinet de consultation.

Pour plus de confort, un clavier médical est également disponible.

- Master avec Sopro Imaging : **Réf. S\_098\_0001**
- Chariot : **Réf. 700362**
- Claviers Azerty : **Réf. 700695**  
ou Qwerty : **Réf. 700694**



Pour plus d'informations, contactez le responsable commercial local.

SOPRO est le fabricant des dispositifs médicaux de Classe I portant le marquage CE présentés dans ce document. Ces dispositifs médicaux commercialisés par SOPRO et vendus sous la marque COMEG ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie et sont destinés exclusivement à des professionnels de santé.

Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice des dispositifs avant toute utilisation.

[www.comegmedical.com](http://www.comegmedical.com)

COMEG Medical Technologies est la division Médicale du groupe Acteon :

- Plus de **40 ans** d'expérience dans le domaine de la chirurgie.
  - Spécialité axée sur la **chirurgie mini-invasive**.
  - Présence sur **6 continents**.
  - **Réponse aux besoins spécifiques** en chirurgies GYN, URO, ORL, LAP, ARTHRO, CMF et PLASTIQUE
  - **Partenariat** avec les médecins et les équipes médicales.
- COMEG crée des solutions intuitives pour la chirurgie mini-invasive.

  
medical technologies

[www.comegmedical.com](http://www.comegmedical.com)  
ZAC Athélia IV - Av. des Genévriers  
13705 La Ciotat cedex - France  
[info@comegmedical.com](mailto:info@comegmedical.com)